


付 1) オートピペッター (マイクロピペット) の使い方

マイクロピペットとは、一般名であり、ギルソン・Thermo Lab・Excel など数社から製品がでており、各社によって名称が異なる。ここでは、Thermo Labsystems の Finn timer の取扱いについて説明する。

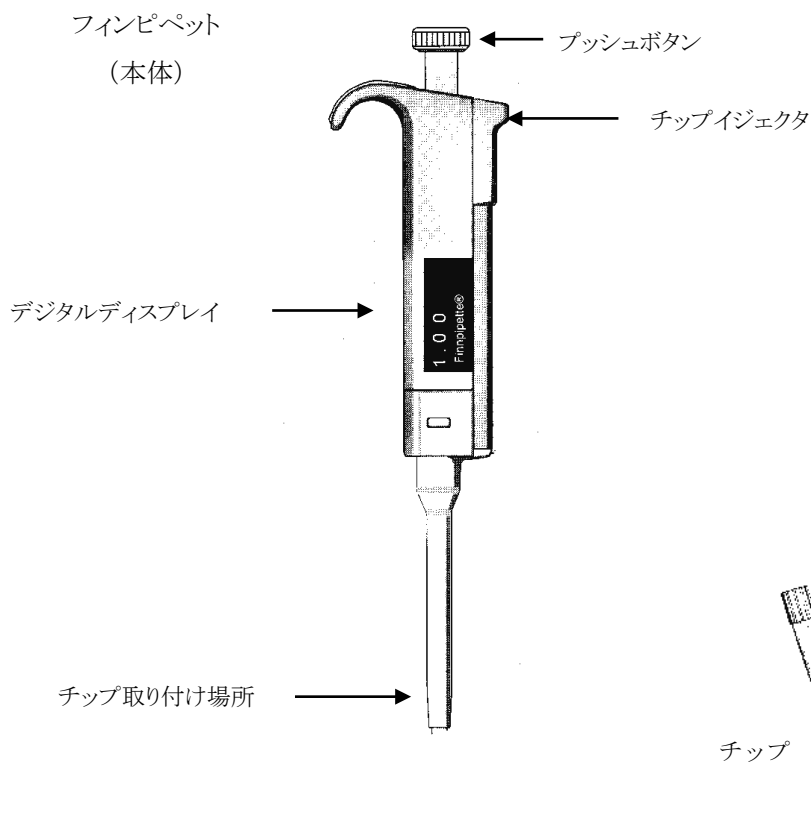

1) 容量のセット

ピペット上端のプッシュボタンを回して、分取したい容量にあわせる。


- ・左に回すと容量は大きくなり、右に回すと小さくなる。
- ・1 回回すごとに“カチッ”という音がして、デジタルディスプレイの目盛が変化するので、ここを見ながら行なう。

注意: 適用容量範囲のマイクロピペットを用いること。

(適用容量範囲は本体に書いてある。

例えば、20-200 μ L・100-1000 μ L など)

その範囲以外の量に無理にあわせようとすると、故障する。

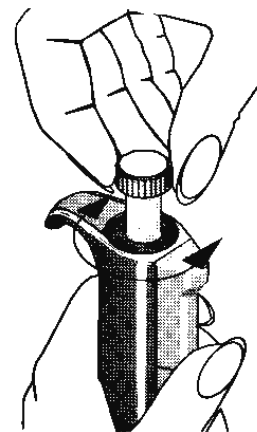


2) チップホルダーの先にチップを取り付ける。

注意: プッシュボタンの色が黄色ならイエローチップ、青色ならブルーチップを付ける。

少しひねるようにして、しっかりと固定する。

- 3) プッシュボタンをレディポジション(A) (押していない状態)から、1 段目(B) (押したとき、抵抗のあるところ)まで押し下げる。

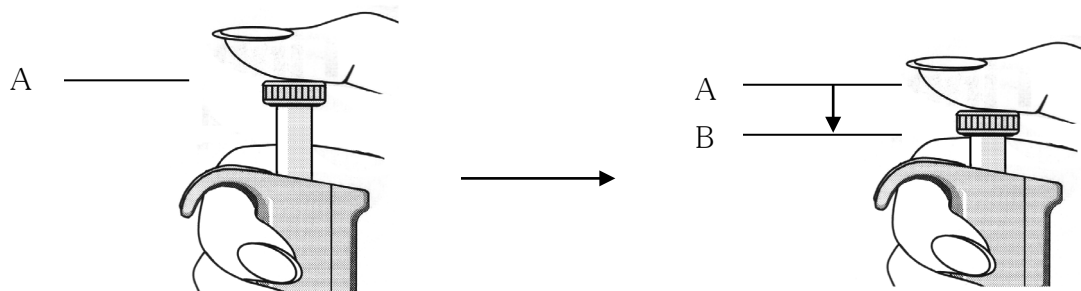


- 4) マイクロピペットをほぼ垂直に持ち、そのままの状態でチップを液に浸す。

注意:チップの先端は液面から1cm 程度まで浸す。

- 5) プッシュボタンをゆっくりと戻し、液体を吸引する。

注意:プッシュボタンはゆっくりとスムーズに戻すこと。


急激に戻すと試料液がマイクロピペット本体に入り、故障する。

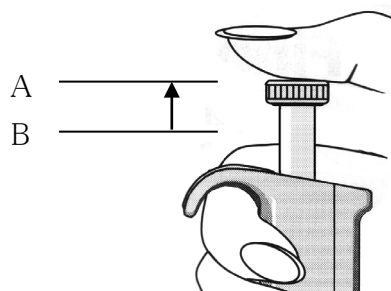


- 6) 1 秒ほど待ち、チップを静かに引き上げる。この時、チップの外側についた試料は容器の縁に軽く触れて取り除き、チップを引き上げる。

注意:液が入っているままで、マイクロピペットを横にしない。


- 7) プッシュボタンを1 段目(B) (押したとき、抵抗のあるところ)まで押し下げ、引き続き1 秒後に2 段目(C) (さらに、プッシュボタンを押せるところまで押す)まで、押し下げ、チップ内部に試料が残らないようにする。

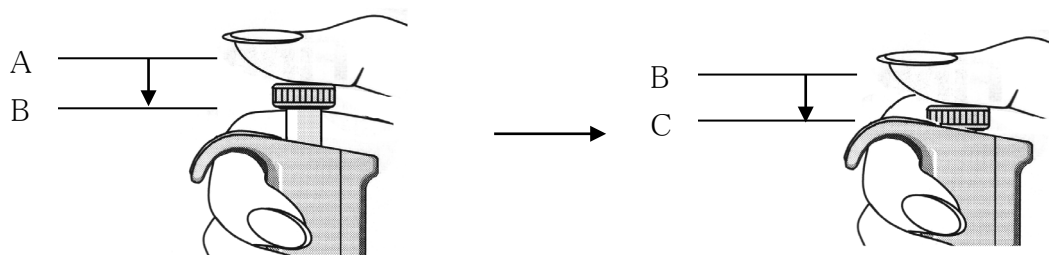

8) プッシュボタンを放し、レディポジション(A)に戻す。

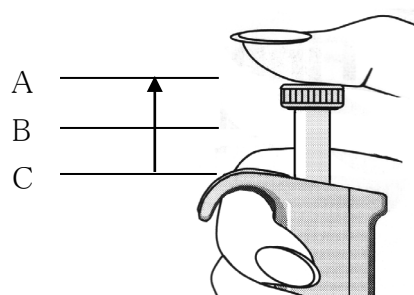

9) チップを取り外すとき、チップイジェクタを親指で押し下げると手を触れることなく、チップを外すことができる。

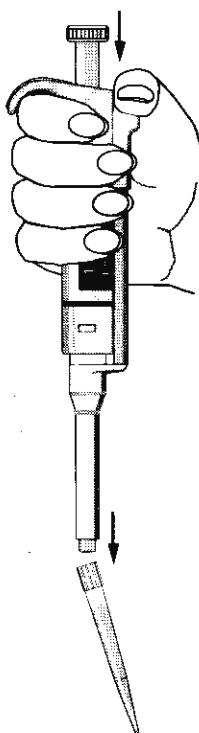

付2)

島津分光光度計 UV-1240 の取り扱い方


<UV 計の準備>

- (1) POWER スイッチを ON にする。
- (2) 自動チェックが始まり、メニュー画面になる。
- (3) 10～20 分間装置をウォーミングアップする。
- (4) 数字キーの 1 を押し、**フォトメトリック**を選択する。
- (5) F2 キーを押し、**試料制御**画面にする。
- (6) F1 キーを押した後、ENTER キーを押し、**初期化**する。

<測定方法>

- (1) セルにゼロ合わせ用の溶液 (PBS または精製水) を入れ、セルホルダーの 1 にセットし、試料室のフタを閉める。
- (2) GOTOWL キーを押して、測定したい波長の数値を入力し、ENTER を押す。**①現在の設定波長**に入力した波長が表示される。
- (3) **③現在のセル番号**が 1 になっていることを確認し、AUTOZERO キーを押す。約 5 秒で**②現在の吸光度**が 0.000 になる。
- (4) セルの中身を捨てる(あるいは元の容器に戻す)。
- (5) セルを次の液で共洗いし、セルに液を入れ、セルホルダーの 1 にセットする。
- (6) **②現在の吸光度**を読み、記録する。
- (7) (4)～(6)を液を替えて繰り返す。

共洗いで液を使いすぎないように注意すること！

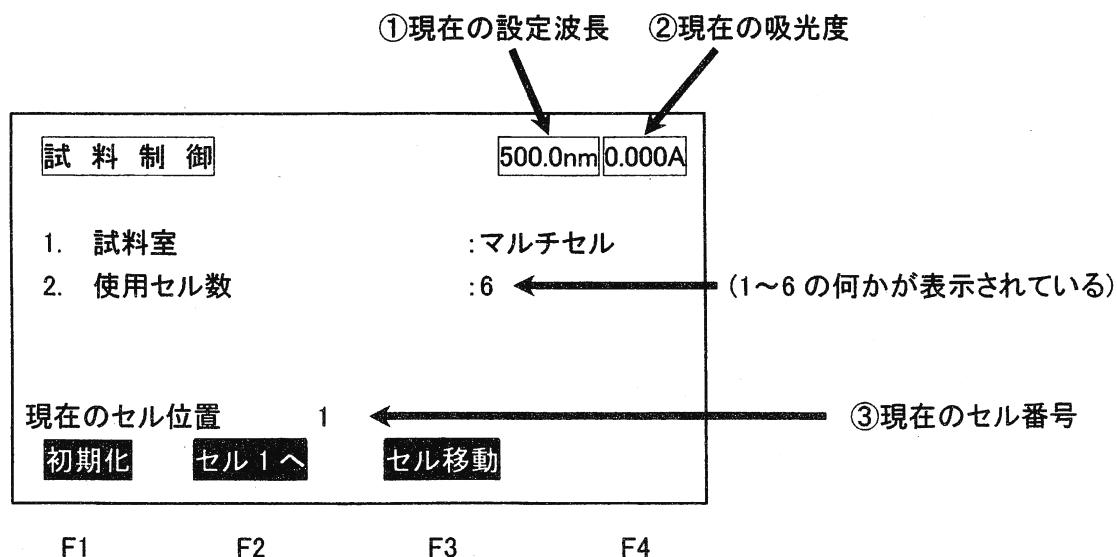

●全ての測定が終わったら・・・

- (1) セル室にセルが残っていないか確認する。
- (2) **モード選択**画面になるまで、RETURN キーを押す。
- (3) 機器背面にある POWER スイッチを切る。コンセントを抜く。

